

waterpik®


SONIC-FUSION®

QUICK START GUIDE Model SF-01 | SF-02


Visit
Waterpik.com/WelcomSF
to watch How To Video

Register your product and
receive over **\$50** in savings.
Waterpik.com/registration


Getting Started (First time use only)

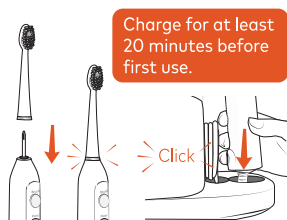

Place flossing brush head firmly into place. Press the power handle onto hose attachment.

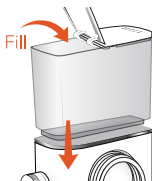

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.

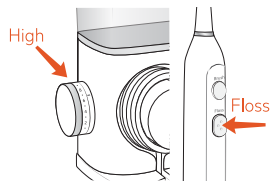

Prime Unit

Turn pressure to high, point tip into sink and press the FLOSS button until water flows. Turn off.

3 Modes



Brush

Press BRUSH button, use light pressure and clean all tooth surfaces.



Floss

Press FLOSS button, keep lips partially closed to allow water to flow into sink.



Brush + Floss

Press BRUSH button, then press FLOSS button.

waterpik®


SONIC-FUSION®

GUÍA DE INICIO RÁPIDO Modelo SF-01 | SF-02


Visite
Waterpik.com/WelcomerSF
Para ver el video "Cómo"

Registre su producto y
reciba más de **\$50** en ahorros.
Waterpik.com/registration


Primeros pasos (solamente al usarlo por primera vez)

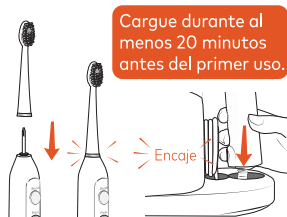

Coloque el cabezal del cepillo de irrigación bucal firmemente en su lugar. Presione la manija de potencia en el accesorio de la manguera.

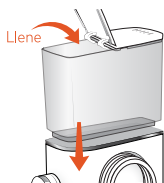


Llene el depósito con agua tibia y vuelva a colocarlo firmemente en la base.

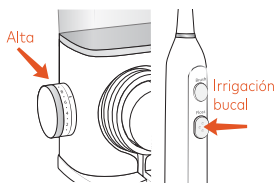

Para preparar la unidad

Gire la presión a alta, apunte la boquilla hacia el lavabo y presione el botón FLOSS (IRRIGACIÓN BUCAL) hasta que fluya el agua. Apague la unidad.

3 modos

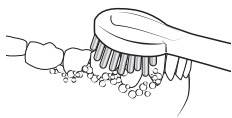

Cepillado

Presione el botón BRUSH (CEPILLADO), use una ligera presión y limpie todas las superficies de los dientes.



Irrigación bucal

Presione el botón FLOSS (IRRIGACIÓN BUCAL), mantenga los labios parcialmente cerrados para permitir que el agua fluya hacia el fregadero.



Cepillado + Irrigación bucal

Presione el botón BRUSH (CEPILLADO), y luego presione el botón FLOSS (IRRIGACIÓN BUCAL).