

# waterpik®


## SONIC-FUSION®

### QUICK START GUIDE Model SF-01 | SF-02



Visit  
[Waterpik.com/WelcomSF](http://Waterpik.com/WelcomSF)  
to watch How To Video

Register your product and  
receive over **\$50** in savings.  
[Waterpik.com/registration](http://Waterpik.com/registration)

## Getting Started (First time use only)

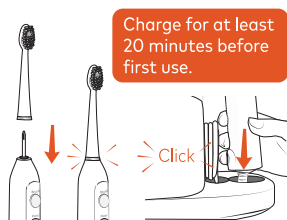

Charge for at least  
20 minutes before  
first use.

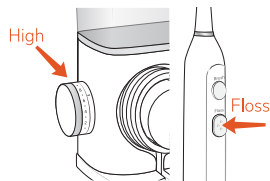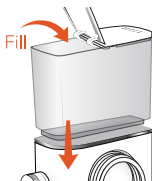

Place flossing brush head firmly  
into place. Press the power  
handle onto hose attachment.

Fill reservoir with warm  
water and replace it  
firmly on the base.

### Prime Unit

Turn pressure to high,  
point tip into sink and  
press the FLOSS button  
until water flows.  
Turn off.

## 3 Modes




### Brush

Press BRUSH button, use  
light pressure and clean all  
tooth surfaces.



### Floss

Press FLOSS button, keep  
lips partially closed to allow  
water to flow into sink.

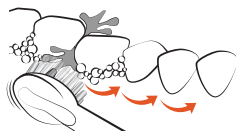

### Brush + Floss

Press BRUSH button, then  
press FLOSS button.

# waterpik®


## SONIC-FUSION®

### GUÍA DE INICIO RÁPIDO Modelo SF-01 | SF-02


Visite  
[Waterpik.com/WelcomerSF](http://Waterpik.com/WelcomerSF)  
Para ver el video "Cómo"

Registre su producto y  
reciba más de **\$50** en ahorros.  
[Waterpik.com/registration](http://Waterpik.com/registration)


## Primeros pasos (solamente al usarlo por primera vez)

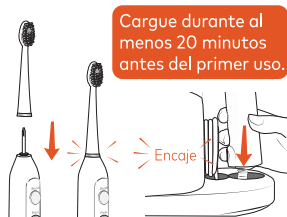

Coloque el cabezal del cepillo de irrigación bucal firmemente en su lugar. Presione la manija de potencia en el accesorio de la manguera.

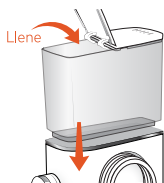


Llene el depósito con agua tibia y vuelva a colocarlo firmemente en la base.

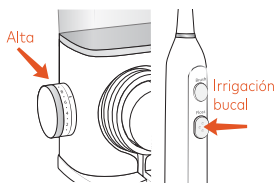

### Para preparar la unidad

Gire la presión a alta, apunte la boquilla hacia el lavabo y presione el botón FLOSS (IRRIGACIÓN BUCAL) hasta que fluya el agua. Apague la unidad.

## 3 modos

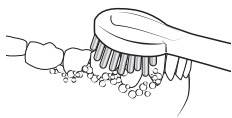

### Cepillado

Presione el botón BRUSH (CEPILLADO), use una ligera presión y limpie todas las superficies de los dientes.



### Irrigación bucal

Presione el botón FLOSS (IRRIGACIÓN BUCAL), mantenga los labios parcialmente cerrados para permitir que el agua fluya hacia el fregadero.



### Cepillado + Irrigación bucal

Presione el botón BRUSH (CEPILLADO), y luego presione el botón FLOSS (IRRIGACIÓN BUCAL).