


# waterpik® waterflosser®

## QUICK START GUIDE WP-100 Series


Visit  
[waterpik.com/welcomeWF](http://waterpik.com/welcomeWF)

Register your product and  
receive over **\$50** in savings.  
[waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)


### 1 First Use

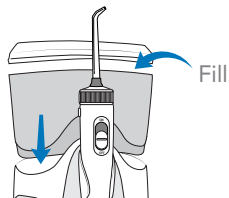

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.

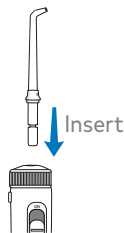


Insert tip until it clicks into place.

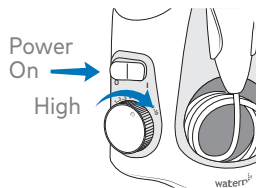


Turn pressure to High, point tip into sink, turn power and water switches ON until water flows. Turn switches OFF.


### 2 Water Floss

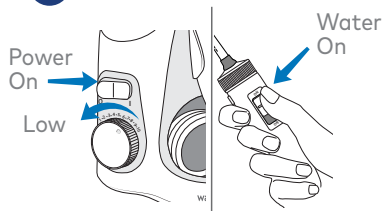

Start on low pressure. Turn power ON. Turn water ON and increase pressure to your liking.

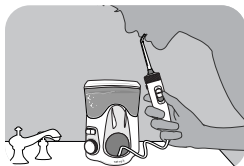

Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.

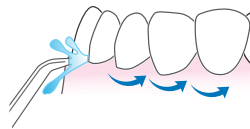


Aim water at a 90° angle to your gumline. Follow the gumline and pause briefly between teeth.

# waterpik® waterflosser®


## GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR WP-100 Série

Visite  
[waterpik.com/welcomeWF](http://waterpik.com/welcomeWF)  
Registre su producto y reciba  
más de USD 50 en descuentos.  
[waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)


### 1 El primer uso

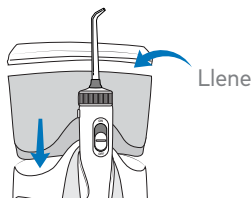

Llene el depósito con agua tibia y vuelva a colocarlo firmemente en la base.

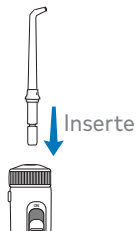


Inserte el cabezal con firmeza hasta que encaje en su lugar.

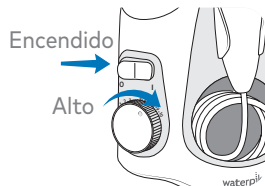


Coloque la presión en Alto, apunte el cabezal hacia el interior del lavabo, encienda los interruptores de encendido y de agua hasta que el agua fluya.


### 2 Cómo utilizar el Irrigador oral

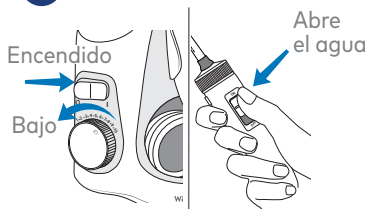

Empieza con la presión baja. Prende el irrigador dental. Abre el agua e incrementa la presión hasta que este a tu agrado.

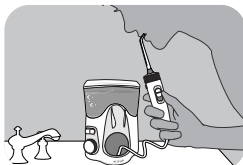

Cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo.

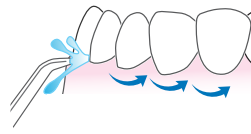

Dirija el agua hacia la encía en un ángulo de 90°. Siga la línea de las encías y haga pausas breves entre los dientes.