


# waterpik® waterflosser®

QUICK START GUIDE WP-320 Series

Visit  
[waterpik.com/welcomeWF](http://waterpik.com/welcomeWF)  
Register your product and  
receive over \$50 in savings.  
[waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)

## 1 First Use

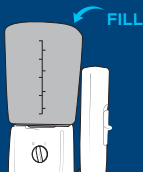

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.



Insert tip firmly until it clicks into place.



Turn pressure to high, point tip into sink, turn unit on until water flows from the tip.


## 2 Water Floss



Turn power ON. Start on low pressure and increase to your liking.



Lean over sink. Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.

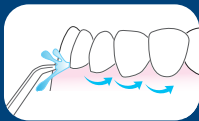

Aim water at a 90° angle to your gumline. Follow the gumline and pause briefly between teeth.

**TO AVOID MESS: KEEP TIP IN MOUTH WHILE UNIT IS ON.**


# waterpik® waterflosser®

## GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

WP-320 Series

Visite  
[waterpik.com/welcomeWF](http://waterpik.com/welcomeWF)  
Registre su producto y reciba  
más de USD 50 en descuentos.  
[waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)

### 1 Primer Uso

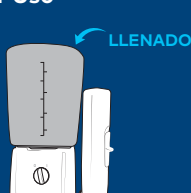

Llene el depósito con agua tibia y vuelva a colocarlo firmemente en la base.




Inserte el cabezal hasta que encaje en su lugar.



Coloque la presión en alta, apunte el cabezal hacia el interior del lavabo, encienda la unidad hasta que salga agua del cabezal.

### 2 Irrigación bucal

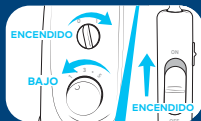

Encienda el equipo. Comience con presión baja e increméntela según su agrado.



Inclínese sobre el lavabo. Cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo.



Dirija el agua hacia la encía en un ángulo de 90°. Siga la línea de las encías y haga pausas breves entre los dientes.

**EVITE DERRAMES: COLOQUE EL CABEZAL EN LA BOCA NTES DE ENCENDER LA UNIDAD**