


## QUICK START GUIDE

Review full instruction book prior to first use.

### 1 FIRST USE

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.

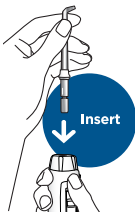

Insert tip firmly until it clicks into place.

Turn pressure to high, point tip into sink, turn power and water switches on until water flows. Then turn off.



### 2 START WATER FLOSSING

**TO AVOID MESS: PLACE THE TIP IN YOUR MOUTH BEFORE TURNING UNIT ON**

Turn power and water on. Start on low pressure and increase to your liking.




### 3 LEAN OVER SINK

Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.



### 4 TECHNIQUE

Aim water at the gumline at a 90° angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.

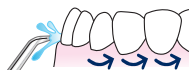

### 5 HOW TO VIDEO

Visit [Waterpik.com/WelcomeCC](http://Waterpik.com/WelcomeCC)

Register your product and receive over \$50 in savings. [waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)


## GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

Revise el manual de instrucciones por completo antes del primer uso.

### 1 PRIMER USO



Llene el depósito con agua tibia y vuelva a colocarlo firmemente en la base.

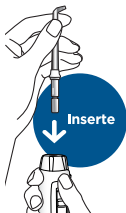

Inserte el cabezal con firmeza hasta que encaje en su lugar.


Coloque la presión en Alto, apunte el cabezal hacia el interior del lavabo, encienda los interruptores de encendido y de agua hasta que el agua fluya. Luego, apáguelos.



### 2 INICIE EL IRRIGADOR BUCAL


**EVITE DERRAMES:  
COLOQUE EL CABEZAL EN  
LA BOCA ANTES DE  
ENCENDER LA UNIDAD**

Encienda el suministro de energía y el agua. Comience con presión baja e increméntela según su agrado.

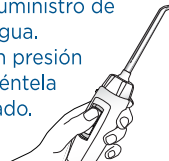


### 3 INCLÍNESE SOBRE EL LAVABO

Cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo.

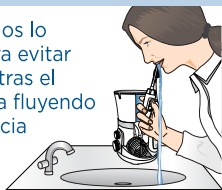

### 4 TÉCNICA

Dirija el agua hacia la encía en un ángulo de 90°. Siga la línea de las encías y haga pausas breves entre los dientes.

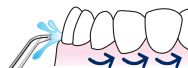

### 5 CÓMO VER VIDEOS

Visite  
[Waterpik.com/WelcomeCC](http://Waterpik.com/WelcomeCC)

Registre su producto y reciba más de USD 50 en descuentos.  
[waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)