

## QUICK START GUIDE

Review full instruction book prior to first use

### 1 FIRST USE

Fill reservoir with warm water and replace it firmly on the base.



Insert tip firmly until it clicks into place.

Turn pressure to high, point tip into sink, turn power and water switches on until water flows.



### 2 START WATER FLOSSING


Turn power and water on. Start on low pressure and increase to your liking.

**TO AVOID MESS:  
PLACE THE TIP  
IN YOUR MOUTH  
BEFORE TURNING  
UNIT ON**




### 3 LEAN OVER SINK

Close lips enough to prevent splashing, while still allowing water to flow from mouth into the sink.

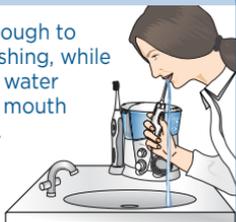

### 4 TECHNIQUE

Aim water just above the gumline at a 90 degree angle. Follow the gumline and pause briefly between teeth.

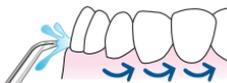

### 5 HOW TO VIDEO

Visit  
[waterpik.com/VID950](http://waterpik.com/VID950)

Register your product and  
receive over \$30 in savings.  
[waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant utilisation

### 1 PREMIÈRE UTILISATION

Remplissez le réservoir avec de l'eau tiède et remettez-le fermement en place sur son socle.



Insérez fermement l'embout jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Réglez la pression à un niveau élevé, orientez l'embout vers l'évier, mettez l'appareil sous tension et réglez l'interrupteur d'alimentation en eau sur ON (marche) jusqu'à ce que l'eau s'écoule.



### 2 DÉMARRAGE DE L'HYDROPROPULSEUR

Mettez l'appareil sous tension et réglez l'interrupteur d'alimentation en eau sur ON (marche). Démarrez sur le réglage le plus bas et augmentez la pression selon vos préférences.

**POUR ÉVITER LES ÉCLABOUSSURES : PLACEZ TOUJOURS L'EMBOUT DANS LA BOUCHE AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.**



### 3 PENCHEZ-VOUS PAR-DESSUS L'ÉVIER

Gardez vos lèvres suffisamment fermées pour empêcher les éclaboussures, tout en laissant l'eau s'écouler de votre bouche dans le lavabo.



### 4 TECHNIQUE

Dirigez le jet d'eau juste au-dessus de la ligne gingivale à un angle de 90 degrés. Suivez la ligne gingivale et faites de courtes pauses entre les dents.



### 5 VIDÉO D'INSTRUCTIONS

Visitez le site Internet [waterpik.com/VID950](http://waterpik.com/VID950)

Enregistrez votre produit et recevez plus de 30 \$ d'économies. [waterpik.com/registration](http://waterpik.com/registration)